



www.mpvmedical.com

MicroDrop® CalimeroJet



Professionelle Inhalation für Kleinkinder!

Der MicroDrop® CalimeroJet ist ein speziell für Kinder entwickeltes, druckluftbetriebenes Inhalationsgerät für die Behandlung der unteren Atemwege, farbenfroh und kindgerecht in allen Details.

Der Vernebler produziert feinste Tröpfchen in Form von Aerosolnebel, der das Medikament in die unteren Atemwege (Bronchien) transportiert. Das bedeutet eine hohe Ausnutzung der Medikamente und weitgehende Vermeidung von Nebenwirkungen.







Vorteile des MicroDrop® CalimeroJet

- √ Farbenfrohes Design
 - Der speziell auf Säuglinge und Kinder abgestimmte Vernebler mit kindgerechtem Mundstück sieht aus wie eine kleine Spielzeugente und steigert die Akzeptanz der Therapie.
- ✓ Universell einsetzbar mit ausgezeichneter Qualität
 - Für alle zur Inhalation zugelassenen Lösungen und Suspensionen geeignet. Empfohlen vom Deutschen Allergie- und Asthmabund e.V. und 5 Jahre Garantie.
- ✓ Geringes Restinhalat nur 0,4 ml
 - Das innovative Ventil-System sorgt für kürzere Inhalationszeiten und beugt Medikamentenverlusten vor: Vorteil bei sehr teuren Medikamenten.
- ✓ Praktisch mit leistungsstarkem Kompressor
 - Mit Einfüllskala für exaktes Dosieren und praktischem, verstellbarem Tragegriff. Niedriges Geräuschniveau des Kompressors.


Medikamentenablagerung in Abhängigkeit der Teilchengröße

Je nach Größe der vernebelten Aerosolteilchen lagert sich das Inhalat (Medikament, Sole usw.) in verschiedenen Bereichen der Atemwege ab.

Mit einem mittleren Teilchenspektrum von ca. 2,37 μm hat der *CalimeroJet* eine hohe Abdeckung in den unteren Bereichen der Lunge.

Indikationen

- ✓ Asthma bronchiale
- ✓ Erkältung
- ✓ Bronchitis
- ✓ Pseudokrupp
- √ Emphysem
- ✓ Mukoviszidose
- ✓ etc..

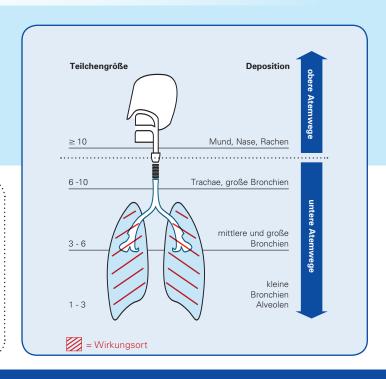

MicroDrop® CalimeroJet



Optionale Silikon-Masken und Sets für hygienische Sicherheit



Weiche Silikonmasken Größe XS (rot) bis 1 Jahr Größe S (gelb) 1 – 3 Jahre Größe M (blau) ab 3 Jahren



Set CalimeroJet Vernebler
Aus Gründen der Hygiene und
zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit sollten Sie jährlich
den Vernebler plus Zubehörteile wechseln. Benutzen
Sie dazu unsere praktischen

Für sichere Hygiene: Year-



Babyset für Säuglinge Babywinkel und Silikonmaske XS zum Vernebeln bei Säuglingen



Tracheostoma-Kindermaske mit 360° schwenkbarem Schlauchanschluss, Schnellverschluss am grünen Gummiband zum komfortablen An- und Ablegen der Maske, Material PVC, latexfrei, Ausatemöffnungen

Das komplette Paket an Zubehörteilen

Year-Sets.











- Kindermundstück
- 2 Kindermaske
- 3 Gebrauchsanweisung
- 4 Luftfilter
- **5** Druckluftschlauch
- 6 Schutztasche

Hilfsmittel-Nr. 14.24.01.0073

MicroDrop® CalimeroJet mit Zubehör ist ein Hilfsmittel und damit verordnungs- und erstattungsfähig

Bei der Verordnung eines Hilfsmittels kann entweder die Produktart entsprechend dem Hilfsmittelverzeichnis genannt oder die 7-stellige Positionsnummer angegeben werden. Das Einzelprodukt (bezeichnet durch die 10-stellige Positionsnummer) wird grundsätzlich vom Leistungserbringer nach Maßgabe der mit den Krankenkassen abgeschlossenen Verträge zur wirtschaftlichen Versorgung mit dem Versicherten ausgewählt. Hält es der verordnende Arzt für erforderlich, ein spezielles Hilfsmittel einzusetzen, so bleibt es ihm freigestellt, in diesen Fällen eine spezifische Einzelproduktverordnung durchzuführen. Eine entsprechende Begründung ist erforderlich.



§7 (3) der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von Hilfsmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung in der Neufassung vom 16.10.2008, in Kraft getreten am 07.02.2009 Partikelgröße: MMAD ca. 2,37 μm (NaCl 0,9%) – EN 13544-1

 Luftdurchlauf Vernebler:
 3,3 l/min. rn

 Luftdurchlauf Kompressor:
 7,5 l/min.

 Max. Kompressordruck:
 2,50 bar

 Gewicht:
 1,91 kg

Geräuschpegel: max. 52 dBA

Medizinische Geräteklasse: Klasse IIa Gerät (Doppelte Sicherheitsisolation)
Typ: Typ B (Gerät m. speziellem Schutz gegen elektr. Risiken)

Gerät für Dauerbetrieb. Gerät nicht gegen Spritzwasser geschützt.
Gerät darf nicht in Räumen, in denen sich leicht entzündbare Gase

.. oder Flüssigkeiten befinden, verwendet werden.

Konformitätszeichen: C€0123

Elektrischer Sicherheitsstandard CEI EN 6060.1.1
Elektromagnetische Kompatibilität nach CEI EN 60601.1.2
Klasse IIa Medizinisches Gerät gemäß 93/42/EEC MDD

Hersteller: Respironics New Jersey, Inc. 5 Wood Hollow Road, Parsippany, NJ 07054



Aufbewahrung:

entwickelt

für Kinder

Temperatur: min. -25°C bis max. 70°C Luftfeuchtigkeit: min. 10% RH bis max. 95% RH

In Betrieb:

Temperatur: min. 10°C bis max. 40°C Luftfeuchtigkeit: min. 10% RH bis max. 95% RH Höhe über dem Meeresspiegel: von 0 bis 2000 m

Technische Änderungen vorbehalten!

Bestellinformationen

Bezeichnung	Artikel-Nummer	PZN
MicroDrop® CalimeroJet Inhalationssystem für Kinder, mit Kompressor, Druckluftschlauch, CalimeroJet Vernebler, Tragetasche, Kindermaske und Gebrauchsanweisung	M 51503-00	2435021
Ersatzteile		
"YearSet" <i>CalimeroJet</i> -Vernebler 1x Vernebler <i>CalimeroJet</i> , 1x Druckluftschlauch, 1x Porex-Filter für MicroDrop® Kompressor	M 53700-03	0791579
"Komplett-Set" <i>CalimeroJet</i> -Vernebler 1x Vernebler <i>CalimeroJet</i> , 1x Mundstück mit Ventil, 1x Druckluftschlauch, Kindermaske, Luftführung transparent ohne Ventil, Ständer, Gebrauchsanweisung deutsch/englisch	M 53700-00	2435044
PorexFilter: Luftfilter für MicroDrop® Kompressor CalimeroJet / Pro	M 50010-30200	0016165
Tasche MicroDrop® CalimeroJet / Pro M 5002034700	M 50020-34700	1046613
Optionales Zubehör:		
BabySet CalimeroJet: Babywinkel und weicher Silikonmaske mit Ausatemöffnungen	M 53160-00	1002840
Maske Silikon Gr. XS mit Ausatemventil	M 40010-02000	1002834
Maske Silikon Gr. S mit Ausatemventil	M 40010-02100	1002828
Maske Silikon Gr. M mit Ausatemventil	M 40010-02200	1002811
Tracheostomamaske Kind mit 360° schwenkbarem Schlauchanschluss, Schnellverschluss am grünen Gummiband zum komfortablen An- und Ablegen der Maske, Material PVC, latexfrei, Ausatemöffnungen	M 40010-01600	6643064
Gebrauchsanweisungen		
Gebrauchsanweisung MicroDrop® CalimeroJet Kompressor deutsch/englisch	M 50020-32900	
Gebrauchsanweisung MicroDrop® CalimeroJet Vernebler deutsch/englisch	M 50020-33000	

MPVMEDICAL

MPV MEDICAL GmbH Wernher-von-Braun-Straße 1 D-85640 Putzbrunn

Tel: +49 (0)89/4617-2370 Fax: +49 (0)89/4617-2390 www.mpvmedical.com info@mpvmedical.com empfohlen von:

M 90010-00200 · www.creativconcept.de 06/11